

Themy


dispositif automatique jetable avec un système d'avancement séquentiel de la canule et du stylet

Themy est un dispositif léger équipé d'un système à ressort permettant une pénétration précise et aisée à l'intérieur des lésions fibreuses ou calcifiées

Le dispositif est doté d'une canule en acier inoxydable avec un aiguisage de type «Menghini» qui permet une excision précise et atraumatique des tissus.

La canule est équipée d'un marquage centimétrique afin de déterminer facilement la profondeur d'insertion pour la sécurité du patient.

- Les prélèvements de la biopsie peuvent être **d'une longueur de 20 mm**
- **dispositif automatique ultra léger et stable**
- Themy est fourni **avec deux points de déclenchement séquentiels**, l'un sur la face avant et l'autre sur la face arrière, offrant au médecin différentes positions de manipulation

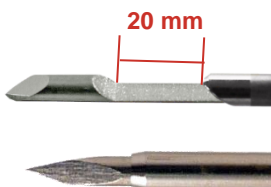

Mode A: Relâche la canule et le stylet en séquence rapide et prélève simultanément un échantillon de tissu




Mode D: Relâche le stylet et permet à l'utilisateur de vérifier la position de l'embout par échographie avant de relâcher la canule en appuyant sur le bouton jusqu'au point A


Chargement libre à une main



Themy			
Code	Gauge d'aiguille	Diamètre mm	Longueur d'aiguille L
TY1411	14 G	2,10	110 mm
TY1416	14 G	2,10	160 mm
TY1420	14 G	2,10	200 mm
TY1611	16 G	1,60	110 mm
TY1616	16 G	1,60	160 mm
TY1620	16 G	1,60	200 mm
TY1811	18 G	1,20	110 mm
TY1816	18 G	1,20	160 mm
TY1820	18 G	1,20	200 mm
TY1825	18 G	1,20	250 mm
Nombre d'unités par emballage : 5 pièces			

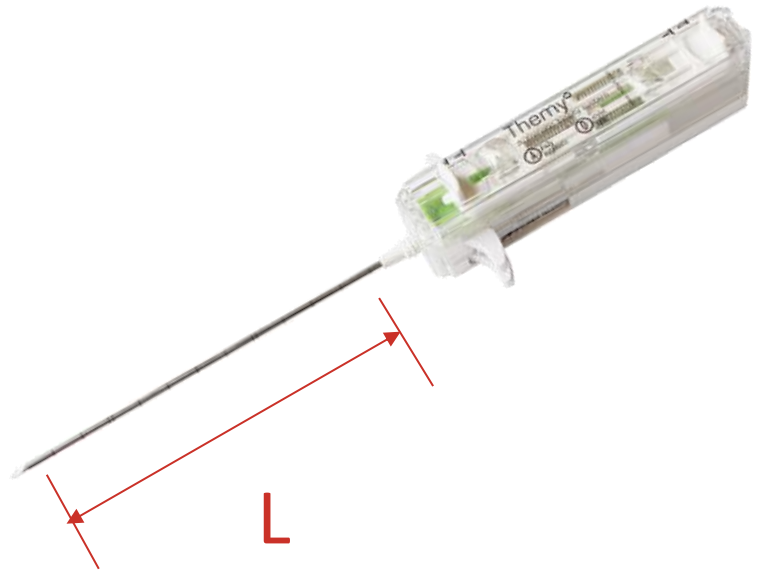

Themy avec coaxial				
Code	Gauge d'aiguille	Longueur d'aiguille L	Gauge du coaxial	Longueur du coaxial l
TYC1411	14 G	110 mm	13 G	82 mm
TYC1416	14 G	160 mm	13 G	142 mm
TYC1420	14 G	200 mm	13 G	182 mm
TYC1611	16 G	110 mm	15 G	83 mm
TYC1616	16 G	160 mm	15 G	143 mm
TYC1620	16 G	200 mm	15 G	183 mm
TYC1811	18 G	110 mm	17 G	83 mm
TYC1816	18 G	160 mm	17 G	143 mm
TYC1820	18 G	200 mm	17 G	183 mm
TYC2011	20 G	110 mm	19 G	94 mm
TYC2016	20 G	160 mm	19 G	144 mm
TYC2020	20 G	200 mm	19 G	184 mm
Nombre d'unités par emballage : 5 pièces				

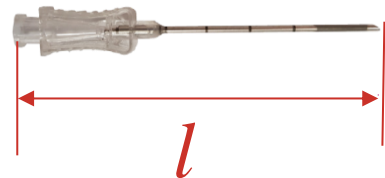

Si vous souhaitez d'autres tailles, merci de contacter notre spécialiste en produits