


KliniTray™

Système de transport et de radiographie pour échantillons tissulaires permettant de déterminer les marges de résection saines

Le système de transport et de radiographie pour échantillons tissulaires KliniTray™ est un système innovant de fixation des tumeurs qui permet le transport, l'analyse et la préparation de tissus tumoraux pour lesquels on a besoin d'une description peropératoire et/ou post-opératoire de la marge de résection saine au millimètre près.

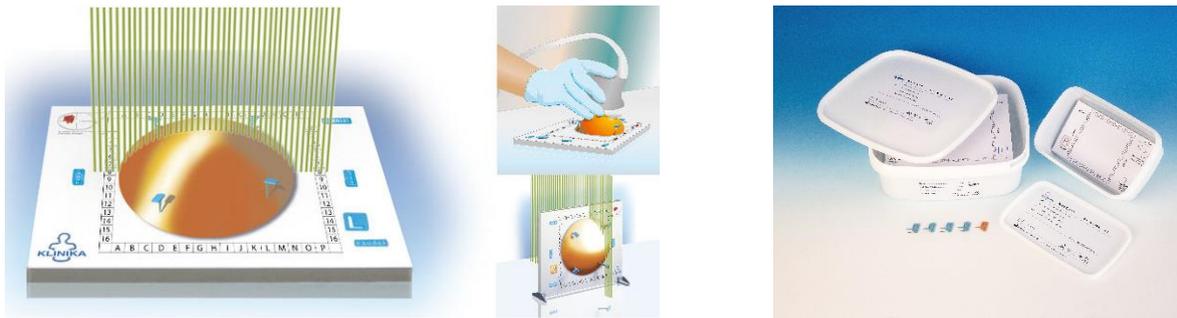

KliniTray™ permet de transporter les tissus en toute sécurité et de les soumettre à un examen radiologique et échographique en respectant une orientation spatiale tridimensionnelle prédéfinie. La découpe des tissus nécessaires à l'analyse histologique a lieu directement sur la plaque, à l'aide des images radiographiques et/ou échographiques.

KliniTray™ est en outre doté de quatre repères («crânien», «caudal», «latéral» et «médial») pour une utilisation en chirurgie mammaire. La localisation des tissus peut être repérée sur le schéma du sein avec le cadre de coordonnées radio-opaque de la plaque.

- **Localisation anatomique sûre** des marges de la préparation
- Boîte de transport **sûre, étanche à l'air et à l'eau**
- **Plaque légère en plastique** pour la fixation des tissus
- Localisation claire des tissus grâce à des **repères radio-opaques**
- Epingles spéciales pour **examens à l'horizontale et à la verticale**

Informations pour la commande:

Plaques mammaires KliniTray™, stériles				
Numéro d'article	2001105	2001205	2001155	2001255
Description	Plaque «L», petite	Plaque «R», petite	Plaque «L», grande	Plaque «R», grande
Longueur	16 cm	16 cm	20 cm	20 cm
Largeur	9,5 cm	9,5 cm	18 cm	18 cm
Hauteur	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm
Nombre d'unités par emballage: 20 unités				

Accessoires pour les plaques mammaires KliniTray™			
Numéro d'article	1000300	1000350	1000400
Description	Boîte de transport, petite	Boîte de transport, grande	Supports pour plaques KliniTray
Volume	1000 ml	3000 ml	-
Nombre d'unités par emballage:	20 unités		2 unités

KliniTray™ Extra small		
Numéro d'article	1000700	1000395
Description	Plaque, extra small	Boîte de transport
Longueur	67 mm	-
Largeur	45 mm	-
Volume	-	120 ml
Nombre d'unités par emballage:	20 unités	5 unités

