

Bague de tension SurErec

Utilisation correcte de la bague de tension SurErec avec le dispositif à dépression Osbon ErecAid™

La bague SurErec est disponible en quatre tailles:

- 4 = diamètre de l'ouverture de 16 mm
- 5 = 17 mm
- 6 = 18 mm
- 7 = 19 mm


Le numéro de la bague est indiqué sur le bord externe.

Quelques tests vous permettront de trouver la bague qui vous convient. Commencez toujours par le plus large (taille 7). Si cette bague génère une érection satisfaisante, nous vous recommandons de garder cette taille. Dans le cas contraire, testez la taille inférieure. Il est important de toujours exercer la pression la plus faible possible et d'éviter un «garrottage» lors de l'érection.

Utilisation

1. Placer la bague sur le cylindre

Enfilez la bague sur le cylindre avec la surface lisse de la bague vers l'extérieur. Les deux points de pression des corps caverneux doivent être orientés en direction du nombril.

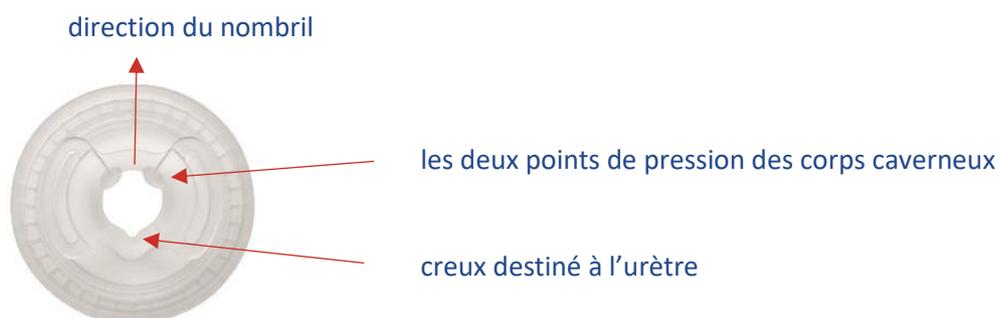

2. Appliquer le lubrifiant Personal Lubricant Gel sur le pénis et la bague

Appliquez une quantité suffisante de lubrifiant à l'intérieur de la bague et sur le pénis, y compris le gland.

3. Assembler le cylindre et la pompe à vide, puis positionner le pénis

Si la bague SurErec est bien positionné, vous pourrez repérer une inscription sur la face supérieure du cylindre. Placez le pénis juste devant l'entrée du cylindre.

4. Créer un vide dans le cylindre

Commencez à pomper de sorte que le pénis puisse glisser dans le cylindre à travers la bague sans pression. Respectez une pause de 10 à 25 secondes entre chaque pompage afin de garantir un flux sanguin optimal dans les corps caverneux. Afin d'obtenir une érection optimale, vous pouvez réduire très légèrement le vide entre les coups de pompe, en appuyant sur le bouton vert, avant de repomper. Pompez ensuite jusqu'à obtenir l'érection souhaitée. Un peu d'entraînement sera suffisant pour repérer rapidement l'érection qui vous convient. Un pénis trop «dur» nuit au rapport sexuel (moins de sensation, éventuellement pression excessive, etc.).

5. Retirer le cylindre de la bague

Dès que vous obtenez l'érection souhaitée (normalement, le pénis se décolle de la paroi du cylindre), vous pouvez à nouveau appuyer sur le bouton vert et retirer le cylindre. Il peut éventuellement être utile d'appliquer également un lubrifiant dans le vagin de la femme.

6. Après le rapport sexuel ou après 30 minutes au maximum, retirer la bague du pénis

Après le rapport sexuel, appliquez à nouveau du lubrifiant sur le pénis afin de faciliter le retrait de la bague. Étirez la bague à l'aide des «oreilles» afin de laisser le pénis se ramollir un peu, puis retirez délicatement la bague.

Il est important de respecter un temps de repos d'au moins 60 minutes avant un nouveau rapport sexuel.

7. Nettoyage

Utilisez uniquement de l'eau chaude et du savon liquide pour nettoyer la bague.