



HaemoCer™ PLUS - Set endoscopico

Polvere emostatica a base vegetale

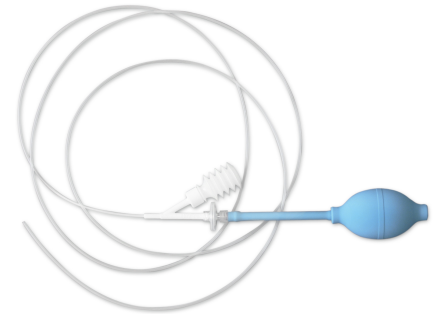

HaemoCer™ PLUS è un innovativo agente emostatico in polvere a base vegetale per l'emostasi di supporto durante gli interventi chirurgici. Il materiale, completamente assorbibile, accelera la naturale cascata coagulativa grazie all'enorme capacità di assorbimento di acqua, con conseguente emostasi immediata.

L'applicatore endoscopico HaemoCer™ è utilizzato per l'applicazione di HaemoCer™ PLUS nelle emorragie gastrointestinali del tratto superiore e inferiore. Il tubo di applicazione viene inserito attraverso l'endoscopio e diretto verso il punto di sanguinamento. Il flusso di aria compressa generato dalla sfera di pompaggio trasporta la polvere direttamente sul punto di sanguinamento.

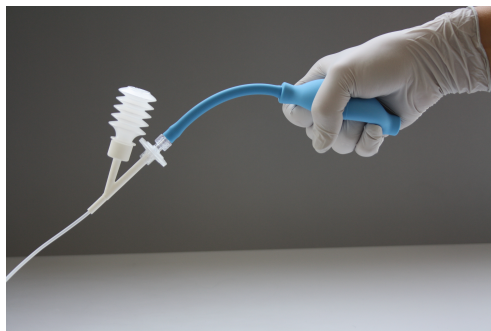

- Sfera di pompaggio come sorgente pneumatica
- Dispositivo monouso flessibile ad azionamento manuale
- **100% privo** di ingredienti a base animale e umana
- **Immediatamente pronto per l'uso** senza una lunga preparazione come lo scongelamento o la miscelazione
- Arriva **senza ausili** come ad esempio un compressore o una fonte di gas ad alta pressione
- HaemoCer™ PLUS viene scomposto dall'amilasi al **100%** e viene degradato dall'organismo in pochi giorni

Numero articolo	Descrizione	Contenuto per confezione
HFP203	HaemoCer Plus, polvere emostatica, 3 g	1 pz.
HFS323	HaemoCer Plus Set endoscopico con 3 g di polvere	1 pz.